

cleadew

Des solutions pensées pour la santé de vos yeux et votre confort

UNE GAMME COMPLÈTE POUR L'ENTRETIEN QUOTIDIEN
DE VOS LENTILLES DE CONTACT

cleadew SL

FONCTIONS :

Nettoie
Décontamine
Enlève les protéines

POUR :

Lentilles sclérales



Cleadew SL est une solution inédite pour un nettoyage intensif de vos lentilles sclérales, gage d'un confort durable

- **Elle contient un décontaminant puissant, la povidone iodée⁽¹⁾**, qui décontamine en profondeur et donne sa couleur orange à la solution. Cette couleur sert aussi de repère visuel pour vérifier que le protocole d'entretien a bien été respecté.
- **Elle élimine efficacement les protéines et les dépôts**, pour préserver le confort et les performances de vos lentilles dans la durée.
- **Son protocole est simple** : aucun massage de la lentille n'est nécessaire.
- **Son étui est adapté** aux grandes dimensions des lentilles sclérales.



Format :

Cleadew SL 300 ml
1 mois d'utilisation

Pack :

Cleadew SL 300 ml + CareSolution* 360 ml

Pack découverte :

Cleadew SL 100 ml + CareSolution* 120 ml

* Cleadew CareSolution, voir page 7

cleadew SL

NETTOYER, DÉCONTAMINER ET ENLEVER LES PROTÉINES

- 1 **Placez un comprimé** neutralisant et nettoyant dans la fente prévue à cet effet. **Assurez-vous de bien utiliser l'étui scléral** dédié au Cleadew SL.

Recommandation :

Le fait de placer le comprimé dans une position autre que celle spécifiée risque d'entraîner une mauvaise neutralisation, ce qui entraînerait une coloration de la lentille de contact.




- 2 **Placez les lentilles** de contact dans le **porte-lentille** de l'étui.
- 3 **Remplissez** avec la solution décontaminante jusqu'à la ligne indiquée.
- 4 **Fermez** le couvercle du boîtier et **laissez reposer** pendant au moins **4 heures**.

Recommandation :

Assurez-vous que les lentilles et la solution soient **incolors**.

RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- 5 **Ouvrez** le couvercle d'un côté et **jetez la solution** de l'étui à lentilles.
- 6 **Retirez** les lentilles nettoyées et décontaminées de leur étui. Tenez-les entre les doigts et **rincez-les des deux côtés** avec du Cleadew CareSolution pendant **au moins 10 secondes**.

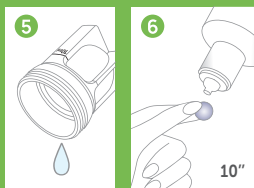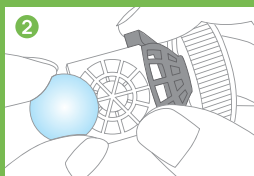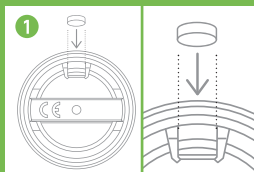

cleadew SLi

FONCTIONS :

Rince

Facilite l'insertion

Améliore le confort

POUR :

Lentilles sclérales



Cleadew SLi est la première solution de rinçage et d'insertion pour lentilles sclérales à associer deux agents hydratants uniques, pour un confort optimal toute la journée

- **Enrichie en acide hyaluronique, elle profite d'un fort pouvoir hydratant** et agit comme un lubrifiant naturel : elle retient l'eau et stabilise le film lacrymal, ce qui aide à réduire les frottements ainsi que les sensations de brûlure et de grain de sable liées à la sécheresse oculaire.
- **L'hypromellose** qu'elle contient limite la formation de bulles d'air sous la lentille au moment de la pose, et prolonge l'effet hydratant.
- **Sans conservateur**, elle respecte la surface oculaire et limite les risques d'irritation.



Format :

Cleadew SLi

30 unidoses de 8 ml

cleadew SLi

- 1 Ouvrez l'unidose en tournant l'extrémité du haut, en prenant soin de la maintenir en position verticale.
- 2 Rincez les deux côtés des lentilles de contact sclérales.
- 3 Remplissez les lentilles de contact sclérales avec du Cleadew SLi avant de les poser sur l'œil.

Recommandation : Vérifiez qu'il n'y ait pas de bulles d'air

- 4 Utilisez l'unidose dans la journée.



- (1) Yamasaki, K., Mizuno, Y., Kitamura, Y., McCanna, D. J., Ngo, W., & Jones, L. W. (2020). The efficacy of povidone-iodine, hydrogen peroxide and a chemical multipurpose contact lens care system against *Pseudomonas aeruginosa* on various lens case surfaces. *Contact Lens and Anterior Eye*, 43(3), 267–274. <https://doi.org/10.1016/j.clae.2019.12.006>
- (2) Su, C.-Y., Yeh, L.-K., Tsao, Y.-F., Lin, W.-P., Hou, C.-H., Huang, H.-F., Lai, C.-C., & Fang, H.-W. (2021). The Effect of Different Cleaning Methods on Protein Deposition and Optical Characteristics of Orthokeratology Lenses. *Polymers*, 13(24), 4318. <https://doi.org/10.3390/polym13244318>
- (3) Yamasaki, K., Drolle, E., Nakagawa, H., Hisamura, R., Ngo, W., & Jones, L. (2021). Impact of a low molecular weight hyaluronic acid derivative on contact lens wettability. *Contact Lens and Anterior Eye*, 44(3), 101334. <https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.05.003>
- (4) Steele, K. R., & Zadnik, K. (2023). Evaluation of rinsing options for rigid gas permeable contact lenses. *Eye & Contact Lens*, 49(9), 386–391. <https://doi.org/10.1097/ICL.0000000000001016>
- (5) Juhong, J., Mordmuang, A., Jewboonchu, J., Rattanathamma, P., Narkkul, U., Karnjana, K., & Udomwech, L. (2022). Rub and rinse contact lenses before wearing as a protective regimen against contact lens-related eye infections. *Clinical Ophthalmology*, 16, 567–577. <https://doi.org/10.2147/OPHTH.S357099>

cleadew GP

FONCTIONS :

Nettoie
Décontamine
Enlève les protéines

POUR :

**Lentilles rigides et
d'orthokératologie**



**Cleadew GP est une solution unique
pour un nettoyage intensif de vos lentilles rigides,
gage d'un confort durable**

- **Elle contient un décontaminant puissant, la povidone iodée⁽¹⁾**, qui décontamine en profondeur et donne sa couleur orange à la solution. Cette couleur sert aussi de repère visuel pour vérifier que le protocole d'entretien a bien été respecté.
- **Elle élimine efficacement les protéines** présentes dans les larmes et qui s'accumulent sur les lentilles. Un nettoyage efficace préserve le confort, la netteté de la vision et limite le risque d'infection.
- **Son protocole est simple** : aucun massage de la lentille n'est nécessaire.
- **Compatible** avec toutes les lentilles rigides et d'orthokératologie⁽²⁾, et tous les traitements de surface.



Format :

Cleadew GP 120 ml
1 mois d'utilisation

Pack :

Cleadew GP 120 ml + CareSolution* 120 ml

Pack découverte :

Cleadew GP 40 ml + CareSolution* 120 ml

* Cleadew CareSolution, voir page 7



cleadew GP

NETTOYER, DÉCONTAMINER ET ENLEVER LES PROTÉINES

- ❶ **Placez les lentilles** sur le support de l'étui à lentilles.
Refermez le couvercle d'un côté, **ajoutez un comprimé** neutralisant et nettoyant, puis **remplissez l'étui à 90%** avec la solution orange décontaminante.
- ❷ **Refermez l'étui** soigneusement de l'autre côté.
Laissez tremper les lentilles dans leur étui pendant plus de **4 heures** (ou toute la nuit).
- ❸ **Assurez-vous** que la solution et les lentilles soient **incolors** avant de les porter.

RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- ❹ **Ouvrez** le couvercle d'un côté et **jetez la solution** de l'étui à lentilles.
- ❺ **Retirez** les lentilles nettoyées et décontaminées de leur étui. Tenez-les entre les doigts et **rincez-les des deux côtés** avec du Cleadew CareSolution pendant **au moins 10 secondes**.

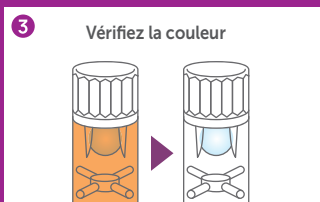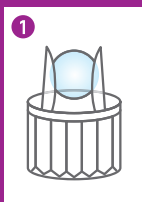

cleadew CareSolution

FONCTIONS :

Rince

Améliore le confort

POUR :

Tous types de lentilles




Cleadew CareSolution est une solution de rinçage, à utiliser après le nettoyage de vos lentilles

- **Sa spécificité** : elle contient un dérivé d'acide hyaluronique qui maintient les lentilles parfaitement hydratées et procure un confort de port durable.
- Rincer ses lentilles permet d'éliminer les résidus de nettoyant et de prolonger la durée de vie confortable des lentilles⁽⁴⁾.

Important : cette solution sert uniquement au rinçage, elle ne doit jamais être utilisée pour remplir les lentilles sclérales avant la pose (utilisez Cleadew SLi).

Format : Cleadew CareSolution 360 ml - Environ 1 mois d'utilisation

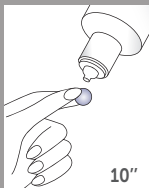

MODE D'EMPLOI

Bien se laver les mains avec du savon doux avant de manipuler les lentilles.

Retirez les lentilles nettoyées/décontaminées de leur étui. Les tenir entre les doigts et **les rincer des deux côtés** avec du Cleadew CareSolution pendant **au moins 10 secondes**.

cleadewMPS

FONCTIONS :

Nettoie
Décontamine
Rince
Hydrate

POUR :

Lentilles souples et hybrides



Cleadew MPS est une solution multifonctions innovante, pensée pour l'entretien quotidien de vos lentilles souples et hybrides

- Elle est la première solution multifonctions à associer deux décontaminants, pour une efficacité renforcée contre les micro-organismes en seulement 4 heures.
- Son agent hydratant inédit et breveté, la technologie HAD⁽³⁾, est un dérivé d'acide hyaluronique de très petite taille qui se fixe à la surface de la lentille. Il maintient une hydratation constante tout au long de sa durée de vie, pour un confort optimal.
- Un léger massage de la lentille avant le trempage permet d'éliminer plus efficacement les dépôts et d'optimiser l'action décontaminante de la solution⁽⁵⁾.



Format :

Cleadew MPS 360 ml
Entre 1 et 2 mois d'utilisation

Format découverte :


Cleadew MPS 60 ml
Environ 10 jours d'utilisation

cleadow MPS

- ❶ **Retirez la lentille** de contact de votre œil et placez la dans la paume de votre main. Instillez quelques gouttes de **Cleadow MPS** sur la surface de chaque lentille et **massez 20 à 30 fois** avec votre doigt.
- ❷ **Rincez soigneusement** une nouvelle fois chaque lentille pendant **5 secondes** avec du **Cleadow MPS**.
- ❸ **Remplissez l'étui** à lentilles de **Cleadow MPS** et **placez les lentilles** dans l'étui. **Fermez-le hermétiquement**.
- ❹ **Laissez tremper** les lentilles de contact pendant au moins **4 heures** (ou toute la nuit) jusqu'au moment de les porter.
- ❺ **Rincez les lentilles** de contact pendant **5 secondes** avec une solution neuve de **Cleadow MPS** avant de les porter.

Recommandation :

Après l'entretien des lentilles, **rincez l'étui à lentilles avec du Cleadow MPS** et **laissez-le sécher** à l'air libre.

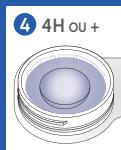

cleadew Soft

FONCTIONS :

Nettoie
Décontamine
Enlève les protéines
Rince

POUR :

Lentilles souples et hybrides



Cleadew Soft est une solution d'entretien à base de povidone iodée, pour un nettoyage intensif de vos lentilles souples et hybrides, sans conservateur

- **Elle décontamine, nettoie et enlève les protéines en une seule étape**, pour préserver le confort de vos lentilles dans la durée. Après neutralisation, le rinçage final se fait avec cette même solution, avant la pose des lentilles.
- **Elle contient un décontaminant puissant, la povidone iodée**, qui décontamine en profondeur et donne sa couleur orange à la solution. Cette couleur sert aussi de repère visuel pour vérifier que le protocole d'entretien a bien été respecté.
- **Simplicité** : aucun massage de la lentille n'est nécessaire.



Format :

Cleadew Soft 360 ml
30 jours d'utilisation

Format découverte :

Cleadew Soft 60 ml
Environ 10 jours d'utilisation

cleadew Soft





- 1 Ouvrez l'étui et placez une lentille sur chaque support. Fermez l'étui soigneusement.
- 2 Ajoutez un comprimé de Cleadew dans l'étui à lentilles, placez-le au centre du fond. Remplissez l'étui avec Cleadew Soft jusqu'au trait bleu. Refermez l'étui soigneusement.

Recommandation :

N'utilisez pas de comprimé décoloré ou cassé.

- 3 Laissez tremper les lentilles pendant au moins 4 heures. Le processus de nettoyage commence lorsque la solution change de couleur.

- 4 Assurez-vous que la solution et les lentilles soient entièrement incolores. Relisez les précautions d'emploi si la présence de la couleur orange persiste après 4 heures.
- 5 Retirez les lentilles.
- 6 Rincez les lentilles dans la paume de la main avec du Cleadew Soft avant de les porter.

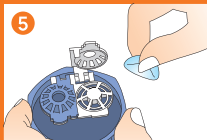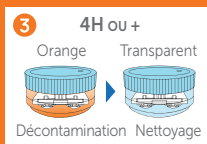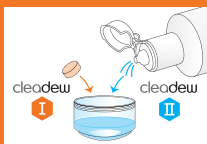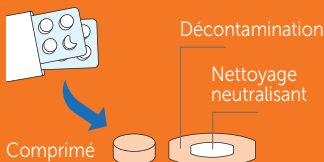

Hygiène et bonnes pratiques

- Lavez-vous les mains avec un savon doux et séchez-les avant de manipuler vos lentilles.
- Changez d'étui à lentilles tous les mois, et laissez-le sécher à l'air libre, ouvert, après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais d'eau du robinet pour rincer vos lentilles ou votre étui.
- Ne changez jamais de solution d'entretien sans l'avis de votre opticien.
- Ne mélangez jamais les solutions entre elles.
- Lisez attentivement la notice d'utilisation fournie avec votre solution d'entretien et rapprochez-vous de votre spécialiste qui saura répondre à toutes vos questions.

Conservation

- Une fois ouverte, une solution Cleadow se conserve 3 mois (sauf les unidoses, à utiliser dans la journée).
- Ne transvasez jamais une solution dans un autre contenant.

Récapitulatif des fonctions des solutions Cleadow

cleadow	SL	SLi	GP	MPS	Soft
Type de lentilles	Sclérales	Sclérales	Rigides Ortho-K	Souples Hybrides	Souples Hybrides
Nettoie	✓		✓	✓	✓
Décontamine	✓		✓	✓	✓
Enlève les protéines	✓		✓		✓
Rince	Care Solution	✓	Care Solution	✓	✓
Insertion		✓		✓	



LES PRODUITS CLEADEW SONT DISTRIBUÉS PAR LCS,
FABRICANT FRANÇAIS DE LENTILLES DE CONTACT

**Pour toute question sur l'utilisation
des solutions d'entretien,
rapprochez-vous de votre spécialiste
qui saura vous conseiller**



**Accédez
à la version PDF
de ce document**

www.laboratoire-lcs.com  

Mentions légales : Les produits Cleadow sont fabriqués par OPHTECS. Ce sont des dispositifs médicaux de classe IIb pour lentilles de contact, portant le marquage CE 2797 dont l'évaluation de conformité a été établie par l'organisme notifié : Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands. Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance de la notice d'utilisation. Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Date de mise à jour : 07/2026.



LCS | 14 000 Caen | France

LCS ©ALL RIGHTS RESERVED 2026 - V3 07/2026